


PHILIPS

sonicare

Îngrijirea dinților

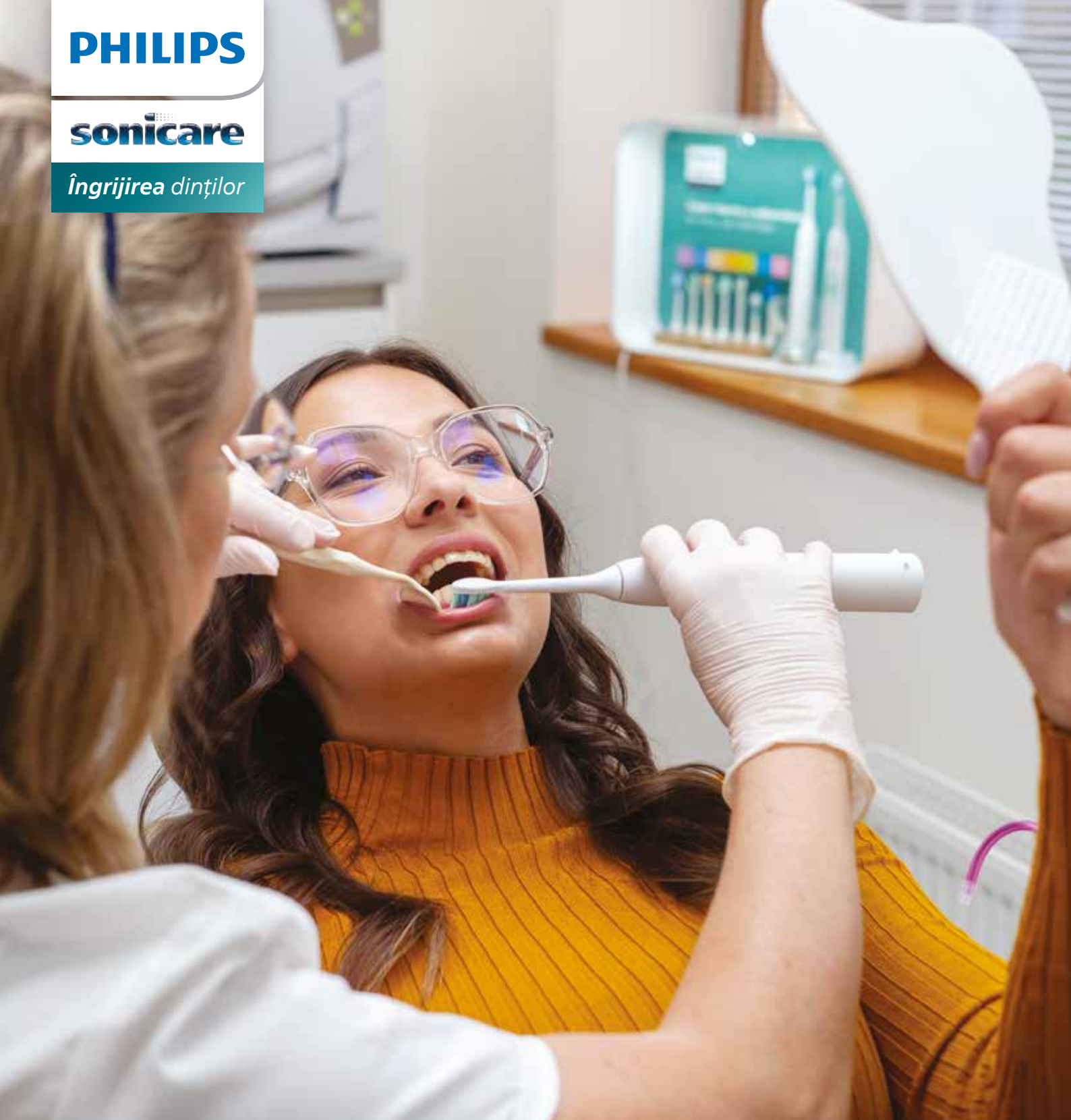

Tehnologia Sonicare

Obține o curățare eficientă de fiecare dată!



[www.philips.ro/
recomandarea-medicalui](http://www.philips.ro/recomandarea-medicalui)



Cuprins

Peste 30 de ani de tehnologie Sonicare	3
Tehnologia Philips Sonicare	
Tehnologia Philips Sonicare	4
Periajul sonic	6
Irigatorul oral Philips Sonicare Power Flosser	8
Philips Sonicare DiamondClean 9000	10
Protocol de îngrijire Philips Sonicare	12
Indicații după tipul de pacient	
Pacient fără probleme specifice	14
Pacient cu afecțiuni parodontale	16
Pacient pediatric/Igiena dentară a celor mici	20
Pacient cu aparat ortodontic fix	24
Pacient cu lucrări protetice, implanturi dentare	28
Pacient cu defecte non-cariogene și pigmentare	32
Igiena limbii	36
Albirea profesională a dinților cu Philips ZOOM	38
Răspunsuri la întrebări frecvent adresate de către pacienți	42
Prezentare generală a capetelor de periere	44
Gama Philips Sonicare	46

*Notă: Această publicație prezintă produse și accesorii bazate pe recomandările specifice ale experților.

PHILIPS **sonicare**

Obține o curățare eficientă de fiecare dată

În 2022 Philips Sonicare sărbătorește 30 de ani de tehnologie Sonicare. Cu peste 100 de ani de experiență de dezvoltare științifică, Philips Sonicare oferă instrumente avansate pentru a vă ajuta pacienții să își asigure o îngrijire orală corectă, adaptată timpurilor și stilului de viață actual.



[www.philips.ro/
recomandarea-medicalui](http://www.philips.ro/recomandarea-medicalui)



30 de ani de igienă orală cu Sonicare



Tehnologia Philips Sonicare: dublă eficiență prin acțiunea mecanică și hidrodinamică

Acțiune mecanică

62.000 mișcări sonice pe minut




Acțiune hidrodinamică



Mobilizează activ fluidele pe o distanță de 3 mm în fața vârfulor perilor curățând astfel eficient interdentar și în șanțurile gingivale - spații neaccesate de tehnicile convenționale de periaj.

Capetele de periere

Dacă avem peri prea moi la o viteză mare se rup. Aceștia trebuie să fie fermi dar moi pentru a funcționa într-o manieră coordonată.

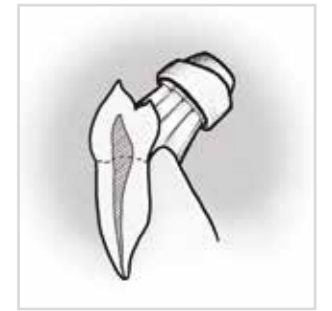

Peri moi solizi Philips Sonicare
Exemplu: Mișcare coordonată

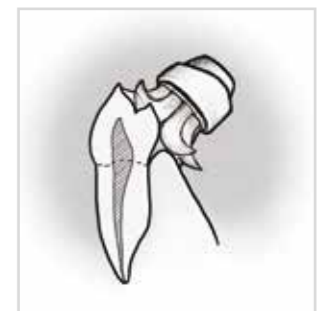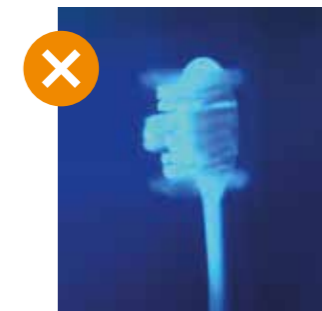

Peri ultra moi sau subțiri
Exemplu: Ruperea fibrelor

Capetele de periere Philips Sonicare

Există o diferență majoră între capetele de periere Philips Sonicare și capetele de periere ale periuței manuale.

Caracteristicile sunt optimizate pentru viața de zi cu zi pentru o îndepărtare eficientă și blândă a plăcii bacteriene.

Tunderea fibrelor capetelor de periere

Tăierea dreaptă a perilor ne-ar forța să punem o presiune mare pe periuță. Lungimile diferite ale perilor din capetele de periere „îmbrățișează” suprafața dintelui și a gingiilor și ajunge acolo unde periuța manuală nu o face, mai ales în zonele distale și interstițiale ale dinților.



Lungimi diferite pe o periuță sonică



Tăietura dreaptă pe o perie manuală

SFAT: Încercați o mișcare circulară pe dosul mâinii cu periuța sonică oprită - va apărea o senzație neplăcută până la traumatizantă. Apoi porniți periuța sonică și o puneți ușor pe dosul mâinii - senzația se schimbă în una blândă și delicată.



Periajul corect cu Philips Sonicare

Pentru cele mai bune rezultate, curățați timp de 2 minute de-a lungul liniei gingivale de la distal spre mezial, suprafețele vestibulare și bucale, apoi suprafețele ocluzale.



Timp optim de curățare

Îți recomandăm să ții mânerul într-un mod asemănător, ca în imaginea alăturată, astfel încât să nu aplici o presiune exagerată.



Prindere puternică, fermă



Prindere ca un stilou



Aplică pasta de dinți

Este suficientă o cantitate de dimensiunea unui bob de mazăre. Recomandăm paste cu grad mic de abraziune și fără agenți de spumare.



Poziția periutei

Capătul trebuie așezat astfel încât perii ating simultan atât gingia, cât și dinții, formând un unghi de 45 de grade cu suprafața dentară.



Mișcare continuă

Plimbă periuța de-a lungul suprafețelor dentare în mod linear, asigurându-te că fiecare suprafață dentară e curățată cel puțin două secunde. Asigură-te că partea activă a periutei atinge întreaga suprafață dentară.



Suprafețele interioare

Cu aceleași mișcări, curăță și suprafețele interioare ale dinților.



Suprafețe ocluzale

Prin aceleași mișcări curăță și suprafețele ocluzale ale dinților.



Suprafețe greu accesibile

Nu uita să cureți și suprafețele ascunse precum fețele posterioare ale molarilor: e simplu cu Philips Sonicare.

Curățare interdentară reinventată Philips Sonicare Power Flosser



Funcții avansate pentru o experiență personalizată

MODURI DE CURĂȚARE

Clean, Deep Clean+, Sensitive, Masaj



QUAD STREAM

Capătul de curățare unic creează 4 jeturi pentru o curățare eficientă și blândă.

Irigator oral
Power Flosser



INTENSITATE 1-10

Reglarea presiunii apei

Buton de activare



Implanturi, lucrări protetice

Aparat ortodontic

Parodontologie

Igiena cotidiană

Indicații și beneficii

- Ușor de folosit
- Curățare riguroasă regulată a spațiilor interdentare
- Ușor de utilizat în jurul coroanelor
- Blând în jurul implanturilor
- Curățare în jurul ecluzelor (inclusiv resturile din timpul zilei)
- Eficiență ridicată în timpul tratamentului ortodontic
- Aplicarea de apă în cavitatea orală direct la locul problemei



Mai puțin efort, rezultate mai bune.



Cu Philips Sonicare Power Flosser curățați spațiile interdentare doar într-un minut.



Cu până la 130% mai eficient în îmbunătățirea sănătății gingivale comparativ cu periuța interdentară.¹



¹ Utilizarea duzei QUAD STREAM cu intensitate 8 după curățarea cu o periuță de dinți manuală la pacienții cu gingivită moderată până la severă vs. o periuță de dinți manuală și o periuță interdentară.

Aplicația *Philips Sonicare Connected brushing* ajută la evidențierea erorilor frecvente care apar în timpul periajului.

Tehnologia Philips Sonicare **cu senzori inteligenți**



Philips Sonicare
DiamondClean 9000

Urmați procesul de curățare folosind o aplicație care se va adapta nevoilor dvs.



Protocol de îngrijire Philips Sonicare

Îngrijire Sonicare în 3 pași



Îngrijire interdentară



Periaj electric sonic: Sonicare



Îngrijirea limbii



1. Curățare interdentară

Irigatorul oral Power Flosser folosit cu regularitate îndepărtează impuritățile și 99,9% din placa bacteriană din spațiile interdentare, suprafețele vestibulare cât și cele linguale a zonelor de contact interdentar, menține sub control dezvoltarea patogenilor la acest nivel. Philips Sonicare Power Flosser se poate utiliza și în jurul implanturilor, pe lângă restaurările protetice, sub corpurile de punte sau în jurul aparatelor ortodontice.

Sfat

Curățarea interdentară ar trebui să fie primul pas, facilitând ulterior acțiunea valului hidrodinamic generat de periajul sonic.



2. Periajul electric sonic

Este cea mai eficientă metodă de curățare dentară, printr-o acțiune dublă:

- 1) O acțiune mecanică, blândă, prin 62.000 mișcări/minut, de-a lungul axului lung al dintelui
 - 2) O acțiune hidrodinamică ce asigură o curățare activă 4 mm dincolo de terminațiile capetelor de periaj
- Varietatea mare de capete de periaj asigură acoperirea tuturor situațiilor clinice
 - Siguranța periajului este garantată de mânerul prevăzut cu senzor de presiune, ce protejează împotriva riscului de afectare a țesuturilor moi și dure intra orale

Sfat

Folosiți de preferință o pastă de dinți fără agent de spumare și fără particule abrazive. În cazul în care doriți un efect de depigmentare, alegeți paste de dinți prevăzute cu enzime de albire, nu cu particule abrazive.



3. Îngrijirea limbii

Acest al 3-lea pas completează protocolul de îngrijire orală, asigurând scăderea încărcării bacteriene a cavității orale, precum și a riscului de halenă. Utilizarea Philips Sonicare împreună cu capul Tongue Care+ ajută la igienizarea microspațiilor dintre papilele limbii fără riscul de a răni mucoasa linguală, așa cum se întâmplă în cazul multor scrapere clasice.

Pacient fără probleme specifice



www.philips.ro/
recomandarea-medicalului

Mitul recomandării periutelelor electrice doar persoanelor cu dizabilități sau celor care nu stăpânesc foarte bine regulile unei igiene corecte a dinților a fost de mult depășit. Astăzi putem recomanda periute de dinți sonice tuturor tipurilor de pacienți.

- 1 Ajută-ți pacientul să aleagă tipul de periută în funcție de starea sa de sănătate orală, precum și de design, moduri de periaj și disponibilitatea de a selecta nivelul de intensitate.
- 2 Indică-i pacientului tău un cap de periută adecvat situației sale clinice. Dimensiunea, textura și distribuția perilor sunt specifice fiecărei patologii. De exemplu, noul cap de periere **All-in-One** este ideal pentru îndepărtarea optimă a plăcii bacteriene, masaj gingival, precum și îndepărtarea petelor în rutina zilnică de menținere a sănătății orale.
- 3 Nu uita să îi oferi fiecărui pacient instrucțiunile necesare și verifică-i tehnica în mod regulat.




Philips Sonicare
A3 Premium All-in-One



www.philips.ro/
recomandarea-medicalului

Pacient cu afecțiuni parodontale

Prima comandă Sonicare a fost plasată de Academia Americană de Parodontologie în 1992.

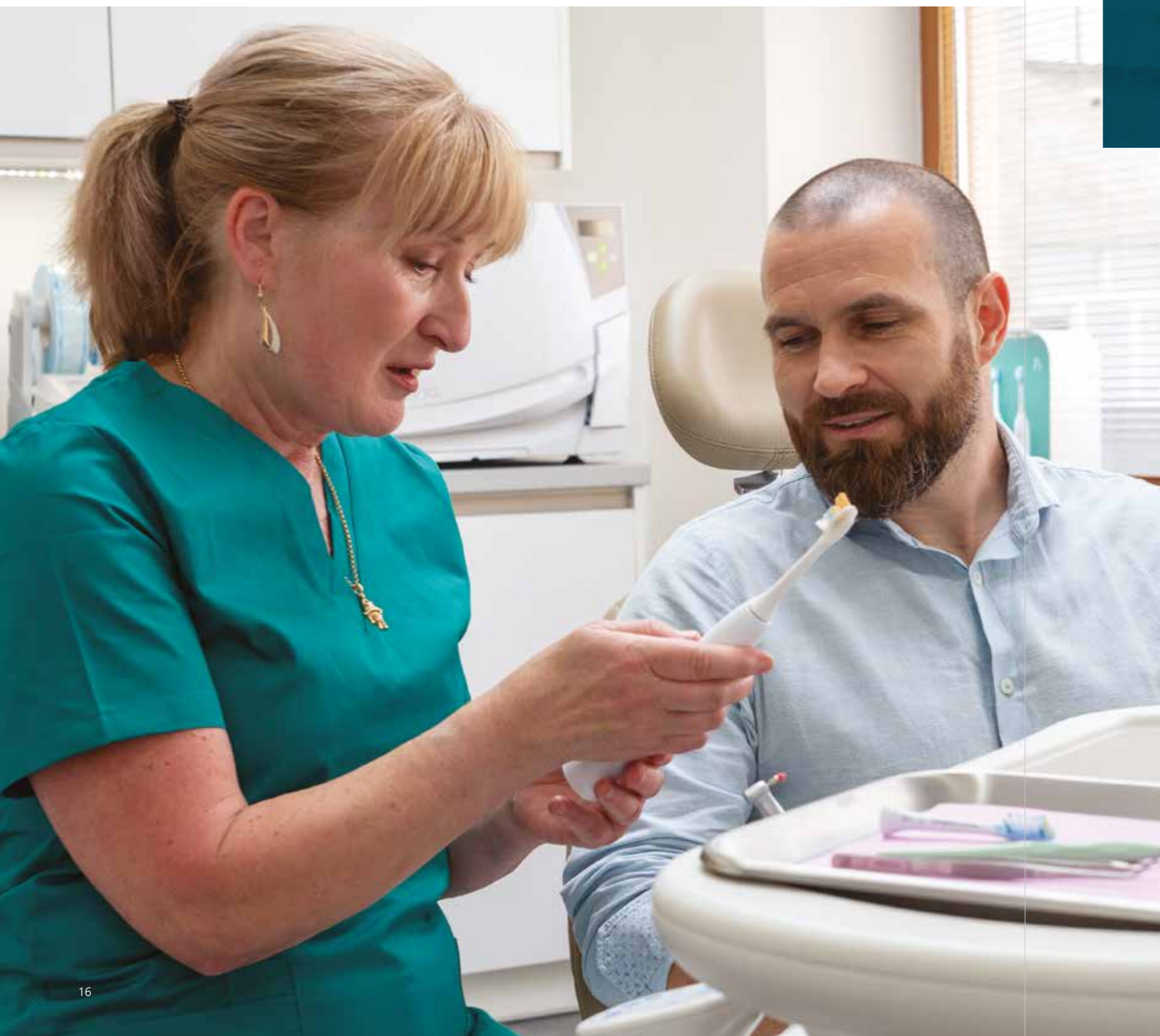

Senzor de presiune
Intensitate reglabilă



Philips Sonicare
ProtectiveClean 6100



Philips Sonicare
DiamondClean 9000



Philips Sonicare
ProtectiveClean 4300



Irigator oral
Power Flosser

Gingivită



Când gingiile sunt inflamate, perii cu terminații soft și extra soft din capetele de periere **Premium Gum** și **Sensitive** țintesc placa bacteriană de la nivelul marginii gingivale pentru o curățare blândă dar eficientă.



Când inflamația se ameliorează vă recomandăm să treceți la capătul de periere **All-in-One** pentru indicații multiple sau **Optimal Plaque Defence** pentru o curățare eficientă.



Premium Gum Care



Sensitive



Premium All-in-One



Optimal Plaque Defence



Capătul de curățare Quad Stream Power Flosser

Rădăcini expuse



În boala parodontală avansată cu rădăcini expuse, capul de periere **Premium Plaque Defence** funcționează bine datorită marginilor moi ce au o acțiune delicată, sigură asupra gingiilor.



O altă opțiune poate fi capătul de periere **InterCare**: cele mai lungi fibre ale acestui capăt de periere vor accesa spațiile interdente deschise.



Premium Plaque Defence



Premium Gum Care



InterCare



Premium All-in-One



Capătul de curățare Quad Stream Power Flosser

Capătul de periere **Sensitive** poate fi o alegere nepotrivită: pacientul ar fi nevoit să depună efort suplimentar pentru igienizarea corespunzătoare, iar rezultatele nu ar fi ideale.

Spațiile greu accesibile



Acțiunea hidrodinamică a tehnologiei Philips Sonicare contribuie la curățarea și oxigenarea spațiilor interdente, a șanțurilor gingivale și a pungilor parodontale (pe o adâncime de până la 4 mm), în zone unde apar populații de bacterii anaerobe patogene. De asemenea, masajul blând favorizează circulația și contribuie la sănătatea gingiilor.

Sfaturi utile



Recomandăm igienizarea zilnică a capetelor de periere.



Recomandăm în mod specific pacientului cu afecțiuni parodontale un periaj cu o durată mai lungă (3-4 minute).

Igiena dentară a celor mici



„În sfârșit periajul dinților nu mai este o problemă; împreună cu Sparkly, copiii își mențin igiena dentară corect într-un mod distractiv și eficient în același timp.”

Dr. Eliza Stan, Pedodont



Eficiență
Obiceiuri sănătoase
Distracție



Philips Sonicare
Sonicare for Kids





Responsabilitate părintească

Este necesar să-i învățăm pe părinți înșiși să lucreze cu periuța sonică pentru copii și să le explicăm că rolul lor nu se limitează doar la curățarea zilnică a dinților copiilor.



Descarcă aplicația gratuit de pe



Motivație

Aplicația Sonicare Kids îi ajută pe copii să se spele pe dinți pe durata celor două minute recomandate și îi învață cum să își perieze dinții corect prin animații și recompense distractive, concepute să îi ajute pe măsură ce își creează o rutină.

Tehnica de curățare

Pentru dinții temporari, este suficient să mutați încet capul periuței de la un dinte la altul, ideal la un unghi de 45° față de gingii. Curățați suprafețele de mușcătură la fel de ușor, aplicând fibre pe suprafață și glisându-le dintr-o parte în alta. Pentru dentiția mixtă se recomandă adăugarea unei mișcări de ștergere pe toată suprafața coroanei dintelui permanent.



Sonicare For Kids Capete 3 ani+

Sonicare For Kids Capete 7 ani+

Optimal Plaque Defence 12 ani+

Sfaturi utile

Pentru copiii mai mari de 12 ani recomandăm o periuță cu senzor de presiune



Philips Sonicare Seria 3100

Pacient cu aparat ortodontic fix



Exersați împreună cu pacientul tehnica de curățare.

Eficiența și siguranța tehnologiei sonice compensează cerințele crescute de igienă în terapia ortodontică.

Eficiență
Siguranță
Complianță



Philips Sonicare ProtectiveClean 6100

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300

Irigator oral Power Flosser

Irigator oral fără fir Power Flosser

Un mod simplu de a deprinde un obicei sănătos, o nouă tehnică de periaj



Nu poziționați niciodată duza perpendicular cu gingia

Dimensiunea spațiilor interdentare se schimbă în timpul tratamentului ortodontic

Curățați spațiile interdentare din exterior și din interior. **Philips Sonicare Power Flosser** îndepărtează și resturile blocate în zona brackeților.



din partea bucală



din partea vestibulară

Sfaturi utile

Din cauza contactului periuței cu elementele aparatelor ortodontice se produce o uzură mai rapidă a capetelor de periaj.



Recomandăm înlocuirea mai frecventă a capetelor în cazul pacienților cu aparate ortodontice fixe.

Periajul nu se face perpendicular.



Tehnica de periaj pentru purtătorii de aparat ortodontic fix

1. De-a lungul liniei gingivale - curățăm șanțul gingival

2. Din partea de sus și jos a brackeților



Rutina igienei orale

Atunci când pacienții urmează un tratament ortodontic este mai important ca niciodată să păstreze dinții cât mai curați și sănătoși. O îngrijire orală adecvată poate ajuta la prevenirea inflamației gingiilor și acumulării de placă bacteriană, dar și la obținerea unor rezultate ortodontice mai eficiente.

Dovedit clinic pentru aparatul dentar fix

Pentru că igiena orală este esențială pentru un tratament ortodontic de succes, Philips a dezvoltat o linie de produse concepută special pentru acești pacienți. Studiile clinice au arătat că pentru pacienții care au făcut un tratament ortodontic, perierea cu o periuță de dinți de putere poate reduce semnificativ nivelul de placă bacteriană. Folosirea acestor produse de către pacienții dumneavoastră poate ajuta la crearea unor obiceiuri de periaj sănătoase și la obținerea rezultatelor dorite în urma tratamentului.

Cum poate ajuta Philips Sonicare

De multe ori, pacienții cu aparat ortodontic trebuie să reînvete cum să se spele pe dinți în timpul tratamentului. Periuțele de dinți Philips Sonicare sunt proiectate pentru o periere ușoară și o alunecare lină pe suprafața aparatului ortodontic. Combinând cu Philips Sonicare Power Flosser (care poate ajunge într-un mod mai eficient în spațiile interdentare), obținem una dintre cele mai eficiente scheme terapeutice de îngrijire a sănătății orale recomandate.

Pacient cu lucrări protetice, implanturi dentare



www.philips.ro/
recomandarea-medicalului



Capătul de curățare unic QuadStream este blând nu numai cu gingiile, ci și cu dinții, fiind recomandat în cazul lucrărilor protetice și a implanturilor.

Complianță ridicată
Combinăție cu apă de gură
Aplicarea locală a clorhexidinei



Irigator oral
Power Flosser



Irigator oral fără fir
Power Flosser



Philips Sonicare
ProtectiveClean 4300



Philips Sonicare
DiamondClean
9000



Complexitatea ridicată a curățării lucrărilor protetice

Igiena cotidiană a lucrărilor protetice este adesea omisă de către pacienți, ceea ce duce la deteriorare treptată a tuturor lucrărilor și a țesuturilor din jur.



Capătul de curățare Quad Stream Power Flosser

Premium Gum Care

Sensitive

Optimal Plaque Defence

Premium All-in-One




Îngrijirea lucrărilor protetice

Irigatorul oral cu noul capăt de curățare Quad Stream este blând cu materialele artificiale. Este recomandat în jurul implanturilor deoarece sunt predispuse la zgâriere în cazul în care se face curățarea cu perițele interdentare.



Philips Sonicare Power Flosser cu tehnologia QuadStream vs dușul bucal cu jet standard

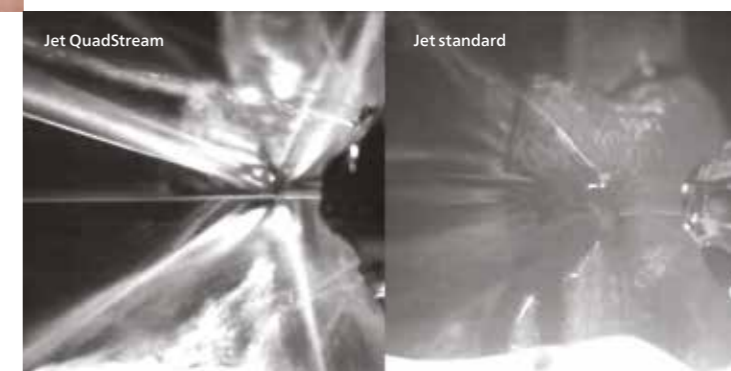

Complianță ridicată

Dușul bucal este ușor de manevrat, ceea ce duce la o utilizare regulată.

Sfaturi utile

Frecvența recomandată de curățare cu irigatorul oral Power Flosser este de două ori pe zi, atât oral cât și vestibular. Capătul de curățare Power Flosser nu trebuie poziționat perpendicular.


Defecte non-cariogene și pigmentare



www.philips.ro/
recomandarea-medicalului



Recomandăm aplicarea unei presiuni minime pe periuța sonică, astfel încât capetele de periere să atingă cu ușurință dinții și gingiile.

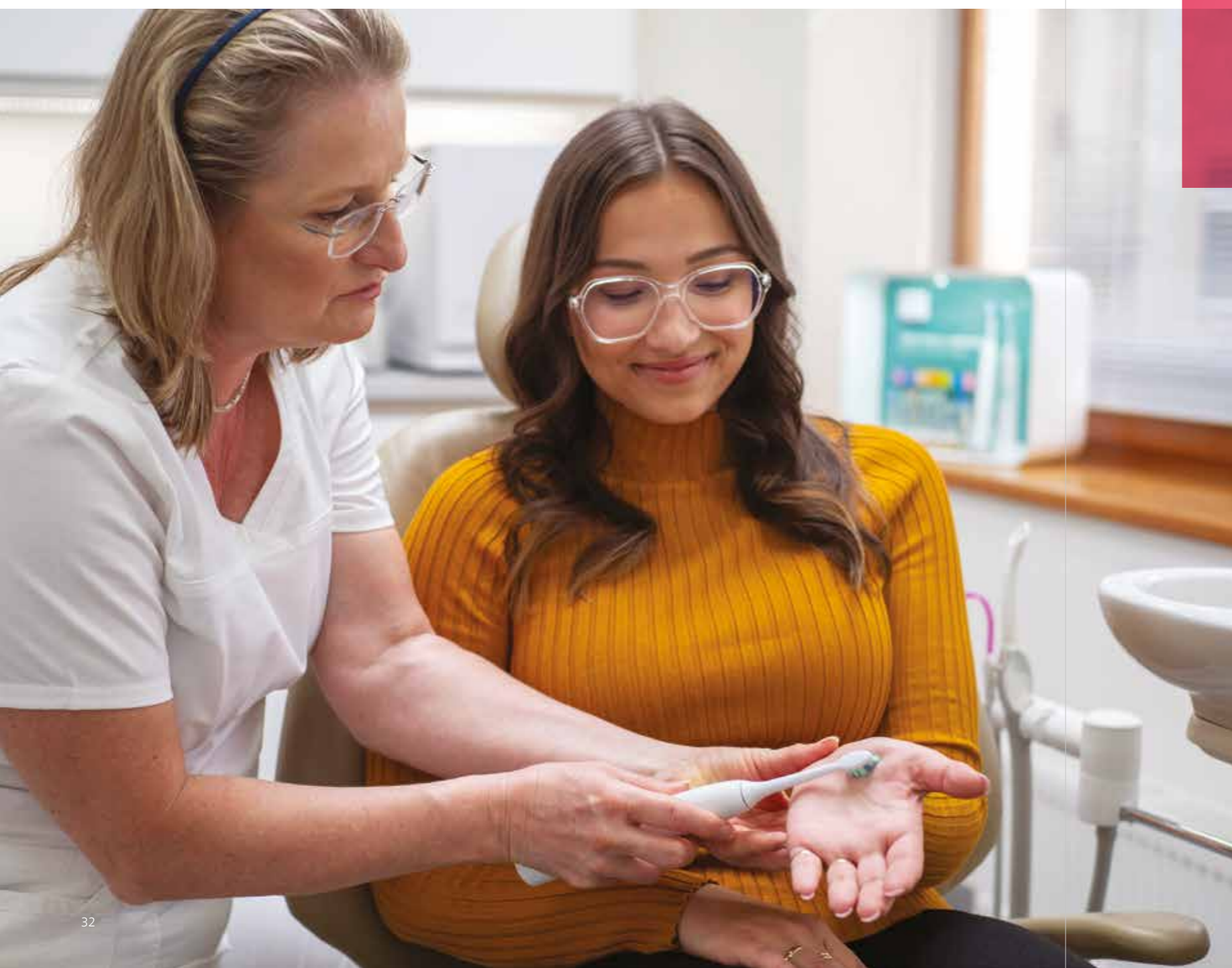

Capete de periere medium-soft
Senzor de presiune
Intensitate reglabilă



Philips Sonicare
DiamondClean 9000



Philips Sonicare
ProtectiveClean 4300



Philips Sonicare
ProtectiveClean 4500



Eroziune, abraziune, atrium, leziuni cuneiforme

Perii fini ai capătului de periere Sensitive sunt ideali pentru probleme ale smalțului și dentină expusă.



Premium Gum Care

Sensitive

Optimal Plaque Defence

Premium All-in-One

Chiar și cu defecte cariogenice, nu trebuie să ne îngrijorăm cu privire la indicațiile unei periuțe sonice. Alegem mereu modele cu intensitate reglabilă.



Presiunea periei

În timpul folosirii periuței manuale, aplicăm periei o forță de aproximativ 250 g/cm². Senzație diferită în cazul periuței sonice care reduce în mod natural presiunea aplicată la doar 100 g/cm². **Periuțele Philips Sonicare sunt prevăzute cu senzor de presiune ce monitorizează presiunea ridicată. Acest lucru salvează atât țesuturile dure, cât și cele moi.**

Evitați erorile comune ale igienei orale:

- ✗ Aplicarea perpendiculară a periuței
- ✗ Presiunea excesivă
- ✗ Mișcările excesive ale periuței



Evaluarea in vitro a abraziunilor dentinare cauzate de utilizarea periuței de dinți electrice Philips Sonicare DiamondClean

Moore M, Putt M, Jain V, de Jager M.
Nepublicat, 2010


Obiectiv

Evaluarea abraziunilor dentinei legate de utilizarea unui cap de periere Philips Sonicare DiamondClean standard în comparație cu o periuță de dinți manuală în condiții clinice simulate.

Concluzie

În acest studiu in vitro, s-a constatat că folosirea periuței Philips Sonicare DiamondClean a dus la 50% mai puține abraziuni dentinare decât o periuță de dinți manuală.

Abraziuni ale dentinei

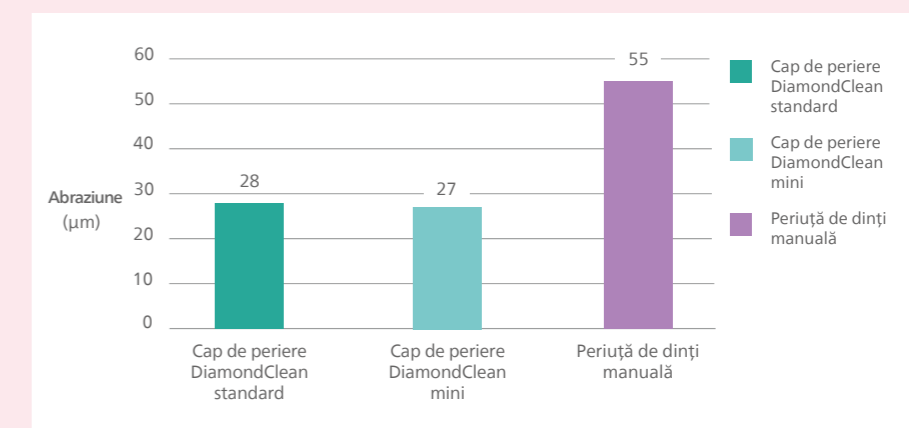

*Capul de periere Optimal White (numit anterior DiamondClean)

Igiena limbii

240 de proeminențe din elastomer de pe capul **TongueCare+** vor rupe stratul de celule moarte între papilele limbii folosind tehnologia sonică.



TongueCare+




Tehnica de curățare cu TongueCare+

1. Puneți capătul de periere **TongueCare+**
2. Porniți periuța pe programul **Clean** și **intensitatea** dorită
3. Alegeți pentru dvs. o mișcare plăcută:
 - Creați **inele** fine
 - Mișcați periuța **din loc în loc**
 - **Mișcați încet** capătul peste limbă
4. Lăsați TongueCare+ să funcționeze **câteva secunde**
5. Curățați **20-60 s**, de **1-2 ori** pe zi

Sfaturi utile

Începeți să vă curățați limba la cea mai mică intensitate, întotdeauna de la vârful limbii. Puteți combina curățarea cu TongueCare+ cu apă de gură.

Atenție: Evitați frecarea și ștergerea suprafeței ca o racletă sau o perie clasică. Curățarea ar fi ineficientă.

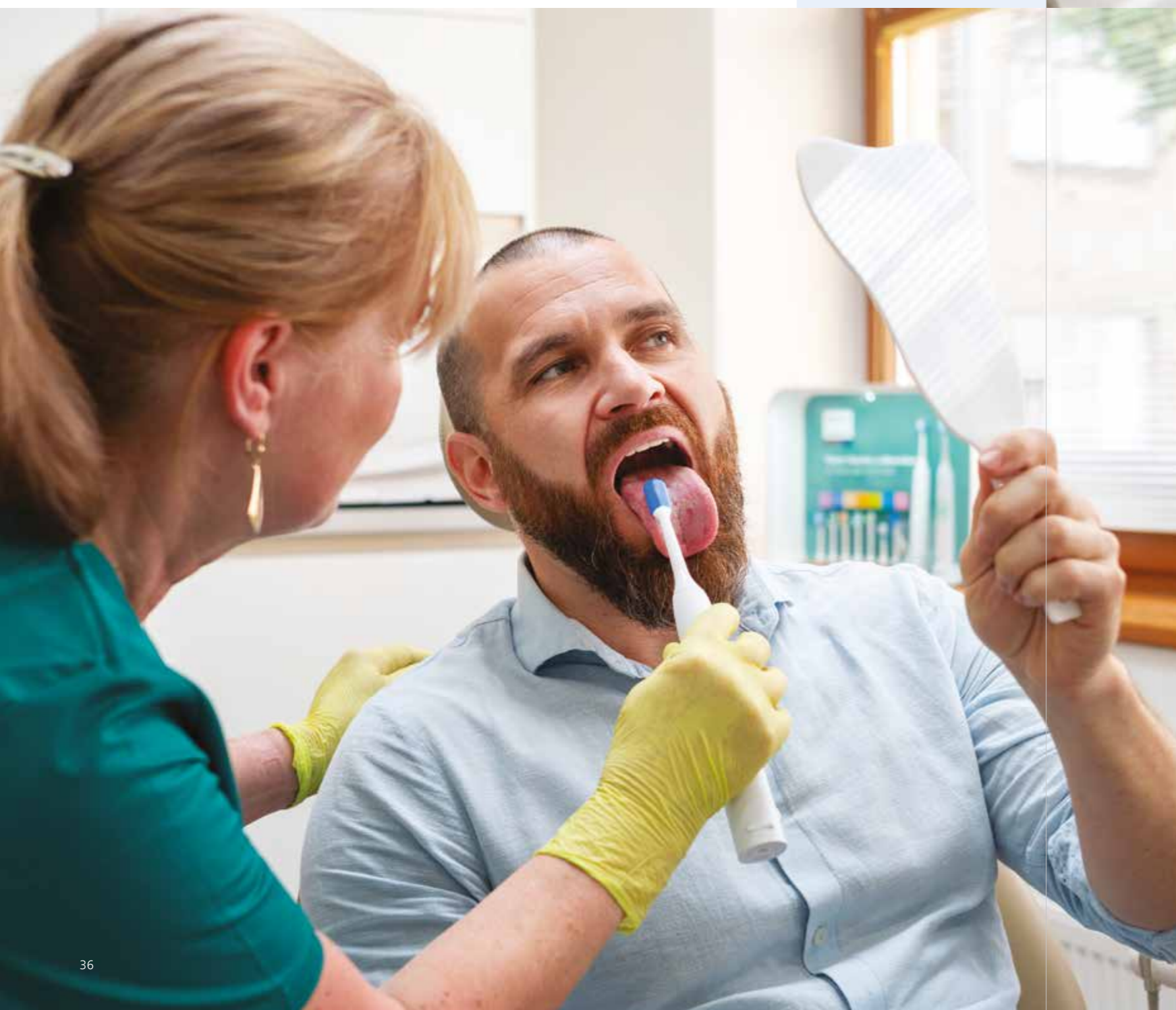

Albirea profesională a dinților cu Philips ZOOM!

Depigmentare

Perii verzi de pe capătul de periere **Optimal White** îndepărtează petele zilnice și dă strălucire dinților. În plus, se potrivește cu ușurință în suprafețele ocluzive ale șanțului gingival.

Utilizarea regulată contribuie, de asemenea, la menținerea nuanței dinților după albire profesională din cabinet.



Optimal White W2

Sfaturi utile

Folosiți paste de dinți cu un conținut scăzut abraziv pe bază de enzime care ajută la dizolvarea petelor.



Peroxid de hidrogen
Fosfat de calciu amorf
Azotat de potasiu
Fluoruri

Philips ZOOM


Albire în cabinet potrivită pentru dinți sensibili cu soluția de peroxid de 6%

Albire în cabinet cu rezultate până la 8 nuanțe cu soluția de peroxid de 25%

Albire pentru acasă



Relief ACP gel dentar

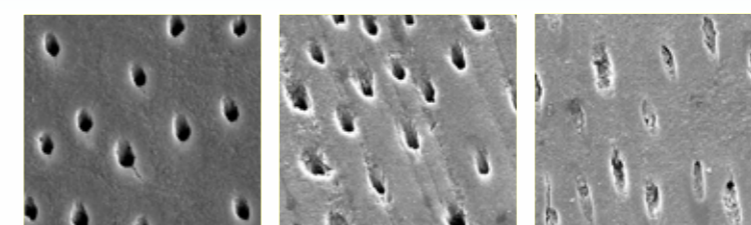

Înainte de tratament

După tratament cu fluoruri și azotat de potasiu

După tratamentul ACP Relief

Aplicare ușoară

- individual
- folosind o periută de dinți
- aplicare în zone sensibile

Indicații

- ameliorarea sensibilității
- sensibilitate la albire
- înainte de tratamentul DH



Eficacitate pe termen lung

Substanțe active:

FOSFAT DE CALCIU AMORF

AZOT POTASIU

Reacție rapidă

FLUORURĂ



1 Familiarizați pacientul cu întreaga procedură de albire.



2 Kitul de albire conține atât gelurile de albire (6% sau 25% H₂O₂), cât și acceleratorul de pH (doar pentru 6% H₂O₂) și tot necesarul pentru bariera protectoare.



7 Lampa Led accelerează doar procesul și nu supraîncălzește dinții în comparație cu lămpile UV! Explicați pacienților că lampa în sine nu albește dinții. În timpul fazei de albire folosiți cele 4 sesiuni timp de 15 minute.



3 Nu uitați să alegeți nuanța inițială a dinților pentru a vedea pacientul diferența vs rezultatul final.



4 Explicați și fotografiați procesul de albire.



8 Arătați-i pacientului cum să aplice gelul acasă în gutiere. Pentru albirea cu 6% soluție de peroxid de hidrogen albirea trebuie să fie combinată: în cabinet (cele 4 sesiuni a câte 15 minute cu lampa ZOOM) și acasă (kit de albire pentru acasă în gutiere).



5 Creați bariera perfectă și protejați toate țesuturile moi. Deviza protecției NO PINK!



6 În timpul albirii, aplicați gelul de albire pe dinți de 4 ori în total. Pentru albirile cu soluție de 6% peroxid de hidrogen nu uitați să aplicați acceleratorul de pH inclus în pachet înainte de fiecare aplicare.



9 Pentru albirile cu soluție de peroxid de hidrogen de 25% seringă separată de gel Relief ACP ajută în cazul în care apare o mică sensibilitate dentară. Gelul poate fi aplicat înainte, în timpul și după albire.



Răspunsuri

la întrebări frecvent adresate de către pacienți

Ce periuță să aleg? (pacient fără nevoi specifice)

Alege o periuță cu senzor de presiune și stabilește dacă ai nevoie de un program sau mai multe și dacă îți dorești o periuță care se conectează sau nu la aplicație. Dacă ești fumător, recomandăm programul White sau dacă ai sângerări gingivale recomandăm programul Gum Health.

Curățarea cu periuța mă gâdilă.

Senzația inițială neobișnuită de gâdilă sau furnicătuiri este complet naturală. Nu te descuraja! Acest sentiment se datorează masajului gingival și încetează după câteva utilizări.

Am auzit că periuțele electrice nu trebuie folosite zilnic.

Pentru cele mai bune rezultate Philips Sonicare de două ori pe zi. Periuța se folosește în condiții de siguranță.

Cum să am grijă de periuță?

După utilizarea periuței Philips Sonicare, desprindeți capătul de periuță de mâner și curățați cu apă conexiunea dintre cele două. Altfel există riscul ca resturile de pastă dentară să se întărească în jurul conexiunii și, în timp, să se deterioreze.

Cu ce se poate umple Power Flosser?

Umplerea se face cu apă curată, puteți adăuga 20 ml apă de gură fără uleiuri esențiale sau bicarbonat de sodiu. După ce ați folosit cu apă de gură, clătiți aparatul cu apă curată pentru a preveni înfundarea.

Ce pastă de dinți să folosesc?

De preferință o pastă de dinți fără agent de spumare și fără particule abrazive. Pentru un efect de depigmentare, pasta de dinți prevăzută cu enzime de albire, nu cu particule abrazive.

Ce poate cauza o prindere incorectă a periei sonice?

Prinderea poate influența eficiența periajului și aplicarea unei presiuni mari în timpul periajului.



Mereu am oglinda murdară după periaj.

Nu uitați să închideți periuța în cavitatea orală pentru a preveni lustruirea mai frecventă a oglinzii.

Există un mic spațiu între cap și perie.

Așa este corect! Acesta este singurul mod în care capetele de periere se mișcă așa cum ar trebui.




Capetele de periere Philips Sonicare



www.philips.ro/
recomandarea-medicului



Toate tipurile de capete de periere sunt compatibile cu toate modelele de periuțe electrice Philips Sonicare.

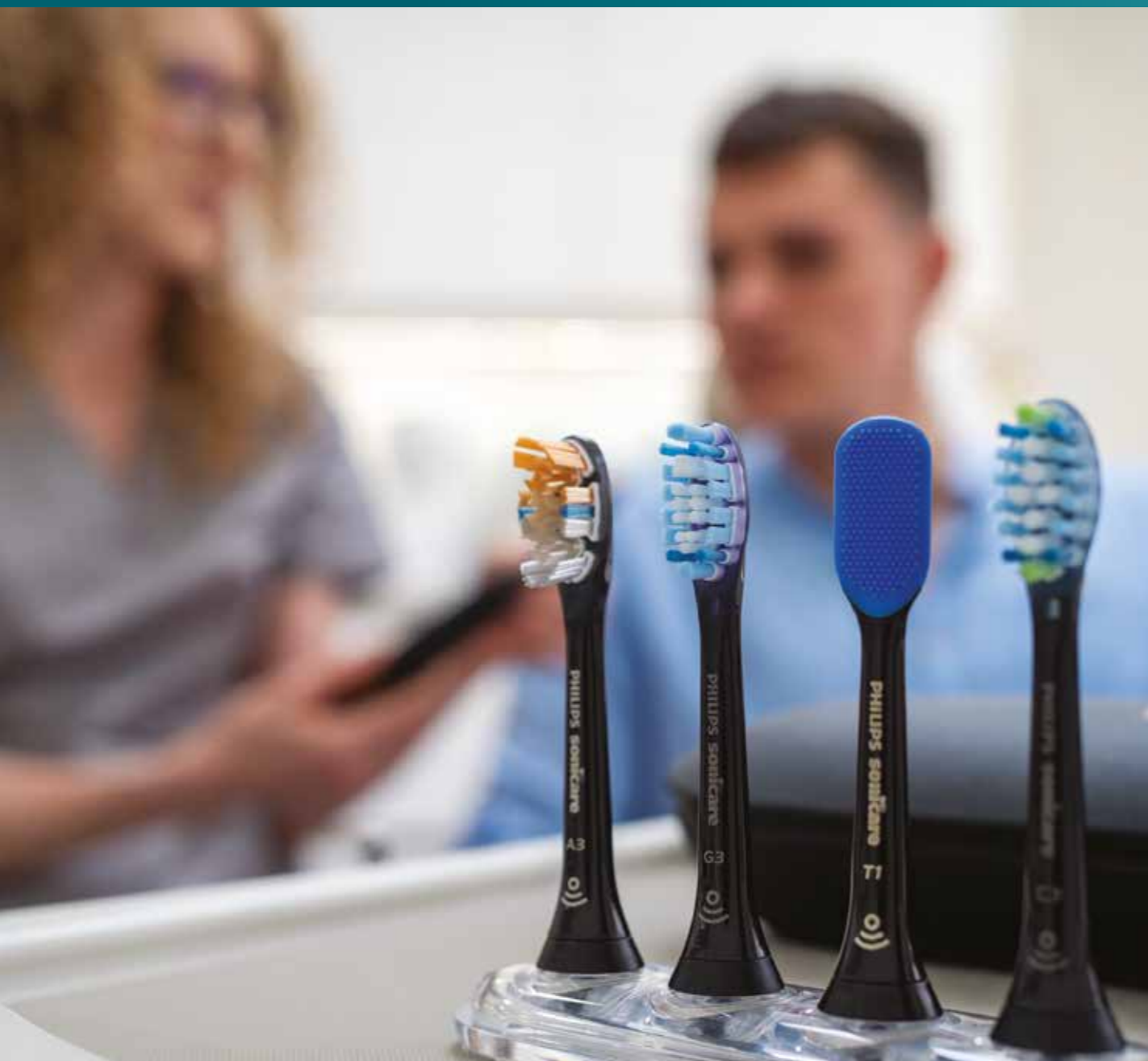

Igiena limbii



TongueCare+

- curățarea zilnică a suprafeței limbii

Copii



Sonicare for kids compacte

- pentru copii cu vârsta de 3 ani+
- Sonicare for kids standard pentru copii cu vârsta de 7ani+

Depigmentare



Optimal White (W2)

- îndepărtează petele și colorațiile extrinseci
- perii mai denși din zona centrală îndepărtează pigmentii și albesc suprafața dentară

Igienă cotidiană



Optimal Plaque Defence (C2)

- pentru igiena cotidiană îndepărtează până la de 7x mai multă placă bacteriană vs o periuță de dinți manuală



Premium Plaque Defence (C3)

- pentru igiena cotidiană, parodontită și rădăcini expuse
- îndepărtează până la de 10x placa bacteriană vs o periuță manuală

Ortodonție



InterCare (I)

- igiena pacienților purtători de aparate ortodontice
- curățare superioară în zonele greu accesibile, dinți interstițiali, parodontită

Consistența perilor soft și medium-soft
Igienă pacienților cu probleme parodontale



Premium All-in-One (A3)

- eficiență maximă cu acțiune combinată de îndepărtare a plăcii bacteriene, îngrijire gingivală și depigmentare
- perii angulați îndepărtează până la de 20x mai multă placă bacteriană (vs o periuță manuală)
- lungimea suplimentară a perilor curăță în profunzime pentru gingii cu până la de 15x mai sănătoase (vs o periuță manuală)
- vârfului triunghiular îndepărtează cu până la 100% mai multe pete în mai puțin de 2 zile (vs o periuță manuală)



Premium Gum Care (G2)

- pentru pacienți cu afecțiuni gingivale
- gingii de până la de 7 ori mai sănătoase în 2 săptămâni (vs o periuță manuală)
- perii cu terminații extra soft țintesc placa bacteriană de la nivelul marginii gingivale pentru o curățare blândă dar eficientă la acest nivel

Sensibilitatea dentară



Sensitive (S)

- pentru pacienți cu sensibilitate dentară sau gingivală ce necesită o îngrijire extra blândă
- curățare eficientă dar extra blândă pentru dinții și gingiile sensibile
- grijă suplimentară față de țesuturile sensibile datorită consistenței ultra soft și a formei rotunjite a perilor activi



Gama Philips Sonicare

	For Kids	Seria 2100	Seria 3100	ProtectiveClean 4300	ProtectiveClean 4500	ProtectiveClean 5100	ProtectiveClean 6100	DiamondClean 9000	9900 Prestige
	Program Clean 3 ani + Program Clean 7 ani +	Program Clean	Program Clean	Program Clean	Program Clean	Program Clean	Program Clean	Program Clean	Program Clean
								Deep Clean	Deep Clean
									White+
					White	White	White	White	
						Gum Health	Gum Health	Gum Health	Gum Health
									Sensitive
				2 trepte de intensitate			3 trepte de intensitate	3 trepte de intensitate	3 trepte de intensitate
	Senzor de presiune		Senzor de presiune	Senzor de presiune	Senzor de presiune	Senzor de presiune	Senzor de presiune		
								Senzor de presiune luminos	Senzor de presiune luminos
Specificații									Senzor de frecare luminos
			Senzor de schimbare a capătului de periere	Senzor de schimbare a capătului de periere	Senzor de schimbare a capătului de periere	Senzor de schimbare a capătului de periere	Senzor de schimbare a capătului de periere	Senzor de schimbare a capătului de periere	Senzor de schimbare a capătului de periere
								Conectare la aplicația Connected brushing	Conectare la aplicația Connected brushing
									Tehnologie SenselQ ce detectează și sincronizează periajul
	Conectare prin Bluetooth la aplicația Sonicare for Kids								
Recomandare	igienă cotidiană	igienă cotidiană periuță de bază	igienă cotidiană	ortodonție parodontologie implantologie igienă cotidiană	igienă cotidiană depigmentare	gingivită igienă cotidiană depigmentare	implantologie gingivită boală parodontală igienă cotidiană depigmentare	indicații multiple	indicații multiple
Alte culori disponibile	●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ● ●	●

	Irigator Oral Philips Sonicare Power Flosser 7000	Irigator Oral fără fir Philips Sonicare Power Flosser 3000	Capăt de curățare Philips Sonicare F1	Capăt de curățare Philips Sonicare F3 Quad Stream
	Program Clean Deep Clean+	Program Clean Deep Clean+	pentru curățare regulată	pentru acoperire maximă
	Masaj Sensitive 10 trepte de intensitate	3 trepte de intensitate	vârful de ghidaj asigură amplasarea corectă	mai eficient cu până la 180% pentru gingii mai sănătoase*
Recomandare	indicații multiple	indicații multiple	orice aparat electric de curățare interdentală Philips Sonicare înlocuire la fiecare 6 luni	orice aparat electric de curățare interdentală Philips Sonicare înlocuire la fiecare 6 luni
Alte culori disponibile		●		

*vs periutele interdentalare



Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul nostru
www.philips.ro/recomandarea-medicultui

